



JMS

DISTRIBUCIONES OCCIDENTE S.A.S.

PORTAFOLIO ODONTOLÓGICO



ZINCIDENT ENJUAGUE BUCAL

NVIMANSOC 99111-20CO

Nuestro enjuague bucal Zincident está formulado para una higiene oral completa y refrescante. Combina los efectos de los aceites esenciales (menta, clavo y árbol de té) con el gluconato de clorhexidina (0,12%) para mantener los dientes y las encías en buenas condiciones. Reforzado con cloruro de zinc para fortalecer el esmalte y reducir la aparición de manchas generadas por la clorhexidina. Esta fórmula equilibrada proporciona una sensación de frescura duradera, promoviendo una sonrisa saludable todos los días



COMPOSICIÓN:

Aqua, Mentha Piperita Leaf/Stem Water, Glycerin, Xylitol, Polysorbate 80, Chlorhexidine Gluconate (0,12%), Zinc Chloride, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Eugenia Caryophyllus Leaf Oil, CI 42090, Sodium Bicarbonate, Citric Acid

INSTRUCCIONES DE USO:

- Usar entre 12-15 ml de Zincident para enjuagar la boca de manera enérgica
- durante 30-45 segundos.
- Elimine el producto de la boca.
- No tragar.
- No diluir con agua

PRESENTACIÓN:

- 120 ml



JMS
DISTRIBUCIONES OCCIDENTE S.A.S.



JMS

DISTRIBUCIONES OCCIDENTE S.A.S.

QUATERSOFT 5G MULTIENZIMÁTICO

NVIMA2021DM-0024414

Es un producto a base de amonios cuaternarios de última generación, indicado como agente de desinfección de dispositivos médicos y equipos biomédicos. Sus componentes también mezcla una función de limpieza, remoción y catálisis, remoción y degradación de desechos celulares, tejidos, grasa, sangre, heces y cualquier tipo de carga orgánica o carga orgánica fuerte. No es tóxico, ni irritante, listo para usar.

COMPOSICIÓN:

Este producto está compuesto por:

- Tensioactivo no iónico y catiónico.
- Amonios cuaternarios 5ª generación.
- Enzimas: Proteasas, lipasa, amilasas y celulasas.

INSTRUCCIONES DE USO:

Estos productos desinfectan dispositivos médicos y equipos biomédicos para prevenir infecciones, limpiando materia orgánica como sangre y fluidos corporales. Para desinfectar, mezcle 10 ml de producto por cada L de agua, aplique. Luego, frote esponja o cepillo suave, enjuague bien con agua para eliminar saliva, seque y esterilice el equipo, y deseche la solución usada.

PRESENTACIÓN:

1.000 mL., 3.800 mL y 19.0000 mL. Utilizando tapa de seguridad y/o dispensador. Excipientos.





GLUTARALTEC®

NVIMANSOC 99111-20C0

GLUTARALTEC® VISOFT es un desinfectante de alto nivel con Glutaraldehído al 2%, efectivo contra bacterias, esporas y hongos. Utilizado en equipos y utensilios del sector clínico-hospitalario y odontológico, previene infecciones. Su máxima eficacia biocida se logra en pH alcalino (8-10), por lo que requiere una sal activadora con sales de amonio cuaternario para elevar su pH de 3.5-5.5 a niveles alcalinos.



COMPOSICIÓN:

Glutaraltec®: Sal activadora:

- Glutaraldehído Sal de Amonio
- Cuaternario Inertes Colorante
- Excipientes

INSTRUCCIONES DE USO:

GLUTARALTEC® se utiliza en elementos críticos como instrumentos quirúrgicos que penetran tajidos estériles y en elementos semicríticos que contactan mucosas sin procedimientos invasivos, como equipos de terapia respiratoria, endoscopios e instrumental odontológico. Active GLUTARALTEC® añadiendo 5 ml de Sal Activadora por cada 1000 ml y agite. Coloque el GLUTARALTEC® activado en un envase de plástico para cubrir completamente el instrumental y cierre herméticamente. Asegure un tiempo mínimo de contacto: bactericida (30 min), tuberculicida (30 min), esporicida (10 horas).

PRESENTACIÓN:

1.000 mL, 3.800 mL y 19.000 mL. Utilizando envases plásticos o colapsables con tapa y tapón o tapa disc top, respectivamente.



Este producto está compuesto por:

- Amonios cuaternarios 5^a generación Excipientes.

INSTRUCCIONES DE USO:

QUATERSOFT 5G DIRECT es utilizado para desinfectar dispositivos médicos y equipos biomédicos, previniendo la propagación de procesos infecciosos. Para su aplicación, se recomienda aplicar la solución del producto directamente sobre la superficie del dispositivo o equipo, asegurando una cobertura completa y dejando actuar durante al menos 5 minutos. Es importante reducir la carga orgánica previamente. No es necesario enjuagar con agua después del proceso de desinfección.

PRESENTACIÓN:

60 mL, 120 mL, 250 mL, 500 mL, 800 mL, 850 mL, 1.000 mL, 3.800 mL, 19.000 mL, tambor 60 L, tambor 55 Gal. Utilizando envase y/o bolsa plástica con tapa de seguridad y/o dispensador.



QUATERSOFT 5G DIRECT

NVIMA2021DM-0024414

Es un potente desinfectante microbicida formulado a base de amonios cuaternarios de última generación e indicado como agente de limpieza y desinfección de dispositivos médicos, equipos biomédicos e instrumental médico odontológico y afines, con el fin de evitar la propagación de procesos infecciosos. Producto biodegradable listo para usar, no es tóxico ni irritante. También es tuberculicida, fungicida y virucida.



JMS
DISTRIBUCIONES OCCIDENTE S.A.S.

BENZALTEC 5G JABÓN

NVIMANSOC 99111-20CO

Es un desinfectante de alto rendimiento formulado con amonios cuaternarios de quinta generación. Diseñado específicamente como agente de limpieza y desinfección en el ámbito odontológico, su objetivo principal es prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. Con un pH neutro, este producto es seguro y suave para la piel, recomendado tanto para la higiene de manos antes como después de cualquier procedimiento. Además, es biodegradable, no tóxico y no irritante, asegurando un uso seguro y efectivo.



COMPOSICIÓN:

Este producto está compuesto por:

- Amonios cuaternarios quinta generación.
- Tensoactivos
- Fragancia

INSTRUCCIONES DE USO:

BENZALTEC 5G JABÓN es ideal para la limpieza y desinfección en odontología. Se aplica en la limpieza y desinfección de dispositivos médicos, instrumental y equipos en el sector clínico-odontológico, hospitalario y afines. Para su uso, aplique el producto, frote enérgicamente por unos minutos y enjuague con abundante agua. Se recomienda una dilución de 250 ml del producto por 4 litros de agua para lavar equipos, instalaciones, aseo 4litros de agua para lavar equipos, instalaciones, áreas de trabajo y superficies, aplicando la solución, frotando enérgicamente y enjuagando completamente.

PRESENTACIÓN:

60 ml, 120 ml, 250 ml, 500ml, 1000ml, 3800ml, 19000ml, tambor 60L, tambor 55 Gal, bolsa plástica 60 ml. Utilizando tapa de seguridad y/o dispensador. -Excipientes

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

COMPOSICIÓN:

Tensoactivo aniónico, tensoactivo no iónico, ácido cítrico, extracto de aloe vera, agentes secuestrantes y excipientes.

INSTRUCCIONES DE USO:

Enjuague con agua la superficie a limpiar.
Diluya DeterAll desengrasante con agua según el nivel de suciedad y aplique la solución.
Frote enérgicamente esponjilla, trapo, trapeador o cepillo según sea necesario.
Enjuague con agua suficiente para remover el producto completamente.
Este producto puede ser aplicado con espumador, hidrolavadora y atomizadores.

PRESENTACIÓN:

2.000 ml, 3.785 ml, 18.927 ml, tambor
55 Gal (200 L). Utilizando tapa de
seguridad y/o dispensador



DETERALL DETERGENTE NEUTRO

Detergente líquido desengrasante formulado sin aroma y sin colorantes, específicamente diseñado para la eliminación eficaz de suciedad y grasa en áreas, instrumental y equipos en la atención en salud, estética y odontológica. Este producto es ideal para la limpieza de equipos, herramientas, pisos y diversas superficies en entornos clínicos, hospitales, centros de salud, IPS, centros de estética, spa y restaurantes hospitalarios. Este producto no contiene fosfatos y es altamente biodegradable.

OXIHELP DESENGRASANTE, LUBRICANTE Y ANTIOXIDANTE

OXIHELP es un producto innovador diseñado para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y superficies metálicas. Su formulación avanzada no solo desengrasa eficazmente, sino que también protege contra la oxidación y proporciona lubricación, prolongando la vida útil de los materiales y garantizando un rendimiento óptimo. Su composición basada en limoneno, extracto de mandarina, ácidos orgánicos y tensioactivo no iónico lo convierte en una opción segura y eficiente.



COMPOSICIÓN:

- Limóneno: potente agente desengrasante natural, derivado de la cascara de cítricos, solvente y portador de fragancia.
- ⊗ Extracto de mandarina: aporta propiedades antioxidantes y un agradable aroma cítrico.
- ⊗ Ácidos orgánicos: coadyuvantes en la acción desengrasante, secuestrantes y contribuyen a la eliminación de óxidos ligeros.
- ⊗ Tensioactivo no iónico: reduce la tensión superficial, mejora la humectación y potencia la acción de limpieza y lubricación.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Agite antes de aplicar.
- Pulverice sobre la superficie, enfocándose en las zonas móviles.
- Al aplicar, accione las articulaciones para facilitar la efectividad.
- Deje actuar entre 1 y 5 minutos.
- Retire el producto esponja brasiba y pano humedo.

PRESENTACIÓN:

1000 ml con gatillo, 3800 ml y 19000 ml.

CONTENIDO:

T Contenido del Kit:

- Quatersoft Direct 5G (300 mL).
- Alcosoft Gel Glicerinado (300 mL).
- Poliabsorb (500 g).
- Guantes estériles (3 unidades).
- Tapabocas (3 unidades).
- Espátula y mini recogedor con escoba.
- Bolsa de recolección de fluidos y derrames (10 unidades).
- Contenedor plástico de 5 L.

TIPS:

- ✓ **Facilita la recolección segura de derrames.**
- ✓ **Incluye elementos esenciales para la protección del usuario.**

Recomendado para hospitales, clínicas, laboratorios, empresas de transporte y sectores industriales.




KIT BIOSEGURIDAD DERRAMES

El Kit de Bioseguridad y Derrames está diseñado para la atención inmediata de derrames de sustancias peligrosas, biológicas, citotóxicas y químicas. Permite minimizar riesgos ocupacionales y proteger al personal asistencial durante la recolección y neutralización de estos fluidos.



JMS

DISTRIBUCIONES OCCIDENTE S.A.S.

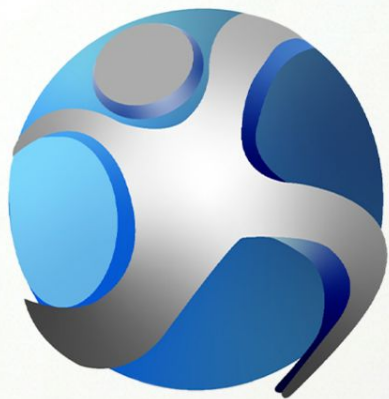

JMS

DISTRIBUCIONES OCCIDENTE S.A.S.

(FGM)

Whiteness Perfect

Tus pacientes necesitan **seguridad, comodidad** y **eficacia** cuando se trata de **blanqueamiento dental**



6X

GALARDONADO

EL MEJOR BLANQUEADOR DENTAL CASEO EN ECUO

Autora: Dra. Maristela Lobo



(FGM) HOME CARE



JMS

DISTRIBUCIONES OCCIDENTE S.A.S.

FGM

Whiteness Perfect

Blanqueador de peróxido de carbamida

Brindando motivos
para sonreír.

3

Disponible en
concentraciones
del 10%, 16%
y 22%;




Baja sensibilidad
gracias a su fórmula
desensibilizante.



6X
GALARDONADO



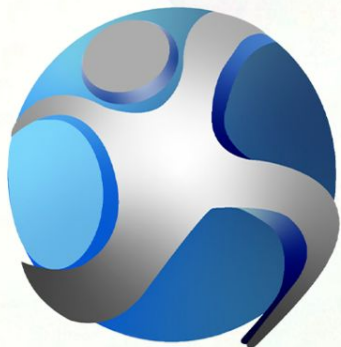

JMS

DISTRIBUCIONES OCCIDENTE S.A.S.

ALLCEM CORE





JMS

DISTRIBUCIONES OCCIDENTE S.A.S.

Sistema de unión en dos pasos, con MDP y nanopartículas, excelente adhesión en humedad variable, libre de BPA y compatible con múltiples protocolos...





JMS

DISTRIBUCIONES OCCIDENTE S.A.S.

Barrera Gingival Top Dam – FGM

Barrera gingival fotopolimerizable,
tixotrópica y fácil de aplicar y remover,
ideal para proteger la encía en
blanqueamientos y durante el aislamiento.





JMS

DISTRIBUCIONES OCCIDENTE S.A.S.

Blanqueamiento Whiteness HP Maxx – FGM

Gel de peróxido al 35% con mezcla en jeringa, protección térmica innovadora y pH estable.





JMS

DISTRIBUCIONES OCCIDENTE S.A.S.

Blanqueamiento Whiteness HP – FGM

Gel blanqueador al 35% con dos fases,
color carmín, pH neutro y rendimiento
para 18 aplicaciones.





JMS

DISTRIBUCIONES OCCIDENTE S.A.S.

Resina Forma – Ultradent

Versátil para restauraciones estéticas y duraderas. 17 tonos adicionales, nanohíbrida. Ideal para dientes anteriores y posteriores. Jeringa de 4 gr.





JMS

DISTRIBUCIONES OCCIDENTE S.A.S.

Kit Opalescence Boost + Opaldam Green - Ultradent

Barrera gingival OPALDAM GREEN:
Protege con precisión. Aísla dientes y
encías para procedimientos seguros.





JMS

DISTRIBUCIONES OCCIDENTE S.A.S.

Resina nanohíbrida
XL-XL2


EXTRA BLANCOS

con todo el poder

Restauraciones
BLANCAS-EXTRABLANCAS



Kerr

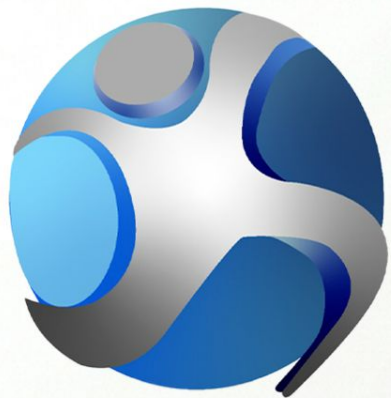

JMS

DISTRIBUCIONES OCCIDENTE S.A.S.

**CONTÁCTANOS
A TRAVÉS DE:**

VERÓNICA LÓPEZ
+57 305 816 9084

especialista1dental.jms@gmail.com

www.jmsinsumosmedicos.com